


WBS KRANKENHAUSDECKE GANZKÖRPER 2 TEILE

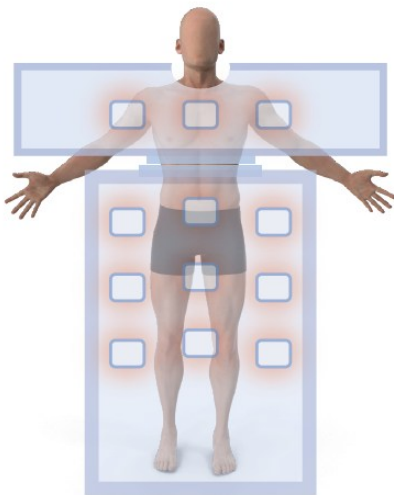

Produktbeschreibung:

Die WBS Hospital Decke Ganzkörper 2 Teile ist ein einwegs selbsterwärmendes medizinisches Gerät, das für den Einsatz im Gesundheitsbereich zur Temperaturkontrolle in den vor-, intraoperativen und postoperativen Phasen gedacht ist.

Vorgesehene Nutzung:

Die WBS Hospital Decke Ganzkörper 2 Teile ist darauf ausgelegt, Körpertemperatur bei Erwachsenen (Alter > 18 Jahre) in Krankenhäusern, insbesondere in Operationsgeräten und Intensivstationen, aufrechtzuerhalten. Sie muss unter der Aufsicht eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns verwendet werden. Dank seines modularen zweiteiligen Designs kann der gesamte Körper des Patienten bedeckt werden, was Ihnen die Flexibilität gibt, die notwendigen Bereiche je nach klinischen Bedürfnissen ungeschützt zu lassen.

Behandlungsprinzip und Leistungsmerkmale:

Die WBS Hospital Decke Ganzkörper 2 Teile verwendet ein selbstheizendes System, das auf einer exothermen chemischen Reaktion zwischen den Komponenten in den Heizflächen basiert. Wenn sie der Luft ausgesetzt sind, lösen die Patches eine Reaktion zwischen dem Eisenstaub und dem atmosphärischen Sauerstoff aus, die durch das Vorhandensein von Katalysatoren erleichtert wird. Diese Reaktion erzeugt schnell und sicher Wärme und verteilt sie gleichmäßig durch die in das Deck integrierten Taschen. Das Design des SMS-Polypropylengewebes gewährleistet eine effektive Wärmedämmung, optimiert die Wärmespeicherung und bietet eine langanhaltende Wärmeversorgung über mehr als 16 Stunden.

Anleitungen zur

Um die WBS Hospital Decke Ganzkörper 2 Teile zu verwenden, folgen Sie diesen Schritten:

- Entfernen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Vakuumpack und achten Sie darauf, die Decke nicht zu beschädigen;
- Setzen Sie die Decke der Luft aus, damit die Patches innerhalb von 15 Minuten die durchschnittliche Betriebstemperatur erreichen;
- Legen Sie die Decke auf den Patienten und achten Sie darauf, dass die angezeigte Seite ("This side up") in Bezug auf den Körper des Patienten nach außen zeigt;
- Es ist wichtig, das Gesicht nicht zu bedecken;
- Während der Operation wird die Decke so angepasst, dass Zugang zur Operationsstelle möglich ist;
- Das Gerät ist für den Einmalgebrauch gedacht und muss nach der Nutzung ordnungsgemäß entsorgt werden.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

Allgemeine Warnungen

Für eine sichere und effektive Anwendung der WBS Hospital Decke Ganzkörper 2 Teile beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Das Gerät ist wegwerfbar, muss nicht wiederverwendet werden und verliert nach der Nutzung seine Funktionalität. Sie muss nach der Anwendung ordnungsgemäß entsorgt werden, gemäß den Krankenhausvorschriften;
- Verwendung nur unter der Aufsicht eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns;
- Das Gerät ist nicht steril. Ergreifen Sie Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz des sterilen Feldes;
- Es ist nicht für die pädiatrische Chirurgie vorgesehen und sollte nicht bei pädiatrischen oder gebrechlichen (älteren) Patienten eingesetzt werden;
- Bedecke niemals das Gesicht des Patienten mit der Decke;
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Haut bei offenen Läsionen, Blutergüssen, Ödemen oder Erfrierungen oder transdermale Verbände. Die erzeugte Wärme kann die Ausbreitung von Medikamenten aus transdermalen medizinischen Systemen (Pflaster) erhöhen;
- Verwenden Sie nicht in sauerstoffreichen Umgebungen, in einer hyperbaren Kammer oder in Anwesenheit von Sauerstofftherapiegeräten;
- Die Dekompression der Primärverpackung beeinflusst nicht die Leistung des Bauelements;
- Verwenden Sie es nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Das Nichtbefolgen dieser Warnungen kann ernsthafte Risiken für die Gesundheit des Patienten mit sich bringen.

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | Die Decke darf nicht von selbst gefaltet werden. |  | Beobachte die Hautreaktion regelmäßig. |
|  | Befestigungsgürtel, Klebeband, Riemen oder zusätzliche Wäsche sollten nicht auf der Decke verwendet werden. |  | Die beheizten Stellen sollten nach oben zeigen, wie auf dem Etikett angegeben. |
|  | Die Decke sollte bei Patienten mit schwerer peripherer Durchblutungsstörung nicht verwendet werden. | | |

Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sind unerlässlich, um eine sichere Anwendung der WBS Hospital Decke Ganzkörper 2 Teile sicherzustellen und mögliche Thermalschäden zu vermeiden:

- Die korrekte Seite der Decke ist mit den Worten "THIS SIDE UP" markiert und muss immer korrekt positioniert werden;
- Falten Sie die Decke nicht wieder auf sich selbst;
- Üben Sie keinen Druck aus und fügen Sie keine Gewichte auf die Decke hinzu, einschließlich medizinischer Instrumente oder anderer schwerer Gegenstände;
- Überwachen Sie ständig die Hautreaktion des Patienten, insbesondere bei längerer Nutzung;
- Nicht bei Patienten mit schweren peripheren Durchblutungsstörungen verwenden, darunter:
 - Schwere Hypotonie oder vorhersehbare anhaltende Hypotonie;
 - Schwere periphere Gefäßerkrankungen;
 - Aortenchirurgie oder distale Aortenklammung;
 - Schwere Herzinsuffizienz oder kardiogener Schock.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Schwangeren oder ohne vorherige ärztliche Konsultation zu stillen.

Kontraindikationen und Nebenwirkungen


Im Falle von Übersensibilisierung, Hautreizungen oder Allergien wird empfohlen, sofort abzusetzen Nutzung des Geräts und konsultieren Sie einen Arzt oder Apotheker. Der Nutzer sollte alle Kontraindikationen, Nebenwirkungen oder schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit der Nutzung des Geräts melden, sowohl der Hersteller (certificazioni@biozetatec.com) und die zuständige Behörde des Mitgliedsstaates des Wohnsitzes, um zur Verbesserung der Produktsicherheit beizutragen.

Lagerung und Stabilität

Das WBS Hospital Decke Ganzkörper 2 Teile Gerät wird einzeln vakuumverpackt in Säckchen verpackt hergestellt aus Polyamid und Polyethylen, entwickelt um die Integrität des Produkts zu gewährleisten und es bis zur Verwendung vor Verunreinigungen zu schützen.

Das Gerät sollte an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden, fern von Wärmequellen, die die Integrität des Produkts beeinträchtigen könnten. Es ist unerlässlich, sicherzustellen, dass die Verpackung bis zur Einsatzbereitschaft fest geschlossen bleibt, um das Gerät vor Verunreinigungen und externen Einflüssen wie Feuchtigkeit und Staub zu schützen. Richtige Lagerung hilft um die Wirksamkeit und Sicherheit des Geräts während der gesamten angegebenen Daue aufrechtzuerhalten.

Das Gerät behält seine Eigenschaften 48 Monate ab dem Herstellungsdatum, wenn es ungeöffnet aufbewahrt wird. Einmal Beim Öffnen sollte die Decke sofort verwendet werden und darf nicht länger aufbewahrt werden.

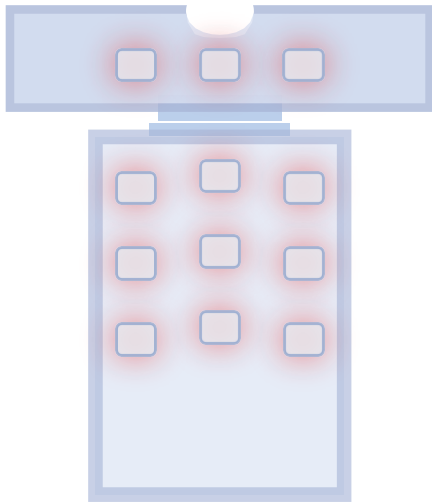

WBS KRANKENHAUSDECKE GANZKÖRPER 2 TEILE

Krankenhaus-Selbstheizdecke

VERWENDEN SIE NICHT, WENN DAS PAKET BESCHÄDIGT IST



Entsorgung Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften und in Absprache mit den Vorschriften Ihrer Gemeinde erfolgen. Die daneben stehende Tabelle zeigt die recycling:	IFU UND SCHACHTELN	ZEITUNG		DECKE	UNSORTIERT	
	VAKUUMBEUTEL	PLASTIK		PATCH	UNSORTIERT	

Symbollegende

SYMBOL	BEDEUTUNG	SYMBOL	BEDEUTUNG
	HERSTELLER VON MEDIZINPRODUKTEN		MEDIZINISCHES GERÄTEZEICHEN
	CE MARK		BEI BESCHÄDIGTER VERPACKUNG NICHT VERWENDEN
	EINWEGGERÄT, NICHT WIEDERVERWENDEN		NOTWENDIG FÜR DIE ÜBERWACHUNG NACH DEM MARKT
	CHARGENNUMMER		ABLAUFDATUM
	UDI-CODE		REF CODE
	NICHT STERIL		WARNUNGEN
	ENTHÄLT KEINE PHTHALATE		ENTHÄLT KEIN LATEX
	WARNUNG: LESEN SIE DIE ANLEITUNGEN ZUR ANWENDUNG		TROCKEN HALTEN UND VOR FEUCHTIGKEIT UND DIREKTEM SONNENLICHT GESCHÜTZT



Weitere Informationen
finden Sie unter
www.wbs.care



Schiedsrichter: [WBS0002](#)