

	cobas click kapillärhelblod	cobas click EDTA-helblod	cobas b 101 kapillärhelblod	cobas b 101 EDTA-helblod
Avvikelse (%) vid 5.7 % (39 mmol/mol) HbA1c	2.0	1.4	1.9	1.3
Avvikelse (%) vid 6.5 % (48 mmol/mol) HbA1c	1.1	0.6	0.9	0.6
Avvikelse (%) vid 8.0 % (64 mmol/mol) HbA1c	-0.1	-0.3	-0.4	-0.5
Avvikelse (%) vid 12 % (108 mmol/mol) HbA1c	-1.8	-1.7	-2.2	-1.9

Ytterligare information


Mer information finns i användarguiden för analysinstrumentet i fråga, samt i metodbladen för alla nödvändiga komponenter.

I detta metodblad används alltid punkt som decimalavgränsare för att markera gräsen mellan hela tal och decimaler i ett decimaltal. Tusentalsavgränsare används inte. Allvarliga incidenter som har inträffat med produkten ska rapporteras till tillverkaren och till berörd myndighet i det land där användaren och/eller patienten uppehåller sig. Sammanfattningen av Safety & Performance Report finns här: https://ec.europa.eu/tools/eudamed

References / Reference / Reference / Referencer / Literatuurverwijzingen / Viited / Viitteen / Références bibliographiques / Literatur / Βιβλιογραφία / Ιστολομiejzyżek / Bibliografía / Letteratura / 参考文献 / Nuorodos / Atsauces / Referanser / Písmennictwo / Bibliografia / Refernte / Referência / Literatura / Referencias bibliográficas / Referencer
1 So JCC, Ma ESK. Hemoglobin and hemoglobinopathies. In: Rifai N, Chiu RWK, Young I, Burnham CAD, Wittwer CT, editors. Tietz Textbook of Laboratory Medicine, Saunders Elsevier, Philadelphia, 7th edition, 2023, chapter 77, p. 1039-1077.e5.
2 Sacks DB. Diabetes mellitus. In: Rifai N, Chiu RWK, Young I, Burnham CAD, Wittwer CT, editors. Tietz Textbook of Laboratory Medicine, Saunders Elsevier, Philadelphia, 7th edition, 2023, chapter 47, p. 502-543.e12.
3 Goldstein DE, Little RR, Lorenz RA, et al. Tests of glycemia in diabetes. Diabetes Care. 2004 Jul;27(7):1761-1773.
4 Sherwani SI, Khan HA, Ekhzaimy A, et al. Significance of HbA1c Test in Diagnosis and Prognosis of Diabetic Patients. Biomark Insights 2016 Jul 3;11:95-104.
5 International Diabetes Federation Guideline Development Group. Global guideline for type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2014 Apr;104(1):1-52.
6 American Diabetes Association Professional Practice Committee. 6. Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes-2024. Diabetes Care. 2024 Jan 1;47(Suppl 1):S111-S125.
7 American Diabetes Association Professional Practice Committee. 2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2024. Diabetes Care. 2024 Jan 1;47(Suppl 1):S20-S42.
8 LeRoith D, Biessels GJ, Braithwaite SS, et al. Treatment of Diabetes in Older Adults: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2019 May 1;104(5):1520-1574.
9 Besser REJ, Bell KJ, Couper JJ, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Stages of type 1 diabetes in children and adolescents. Pediatr Diabetes 2022 Dec;23(8):1175-1187.
10 Shah AS, Zeitler PS, Wong J, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Type 2 diabetes in children and adolescents. Pediatr Diabetes. 2022 Nov;23(7):872-902.
11 Kobold U, Jeppsson JO, Duellfer T, et al. Candidate reference methods for hemoglobin A1c based on peptide mapping. Clin Chem 1997;43:1944-1951.
12 Jeppsson JO, Kobold U, Frike A, et al. Approved IFCC reference method for the measurement of HbA1c in human blood. Clin Chem Lab Med 2002;40:78-89.
13 Consensus Statement on the Worldwide Standardization of the Hemoglobin A1c Measurement. American Diabetes Association, European Association for the Study of Diabetes, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine and International Diabetes Federation Consensus Committee. Diabetes Care 2007;30:2399-2400.
14 Bergenstal RM, Beck RW, Close KL, et al. Glucose ManagementIndicator (GMI): A New Term for Estimating A1C From Continuous Glucose Monitoring. Diabetes Care 2018 Nov;41(11):2275-2280.
15 Beck RW, Bergenstal RM, Cheng P, et al. The Relationships Between Time in Range, Hyperglycemia Metrics, and HbA1c. J Diabetes Sci Technol 2019 Jul;13(4):614-626.
16 Hirsch IB, Welsh JB, Calhoun P, et al. Associations between HbA1c and continuous glucose monitoring-derived glycaemic variables. Diabet Med 2019 Dec;36(12):1637-1642.
17 David M, Nathan, MD1, Judith Kuenen, MD2, Rikke Borg, et al. Translating the A1C Assay Into Estimated Average Glucose Values. 2008 Aug;31(8):1473-8. doi: 10.2337/do08-0545.
18 Nathan DM, Kuenen J, Borg R, et al. Translating the A1C assay into estimated average glucose values. Diabetes Care 2008;31:1473-1478.
19 Bunn HF, Gabbay KH, Gallop PM. The glycosylation of hemoglobin: relevance to diabetes mellitus. Science 1978;200:21-27.
20 American Diabetes Association: eAG/A1C Conversion Calculator https://professional.diabetes.org/diagloglucose_calc.
21 WHO. Use of glycated haemoglobin (HbA1c) in the diagnosis of diabetes mellitus: abbreviated report of a WHO consultation. World Health Organization, Geneva. , WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. WHO/NMH/CHP/CPM/11.1. 2011:1-25.
22 American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes - 2019. The Journal of clinical and applied research and education. January 2019; 42(Supplement 1):S1-S193.
23 Miedema K. Influence of hemoglobin variants on the determination of glycated hemoglobin. Klin Lab 1993;39:1029-1032.
24 Chang J, Hoke C, Ettinger B, et al. Evaluation and Interference Study of Hemoglobin A1c Measured by Turbidimetric Inhibition Immunoassay. Am J Clin Pathol 1998;109(3):274-278.
25 Rohlfing C, Connolly S, Englund J, et al. Effect of elevated fetal hemoglobin on HbA1c measurements: four common assay methods compared to the IFCC reference method. Clin Chem 2006;52 Suppl 6:A108.
26 International Expert Committee Report on the Role of the A1C Assay in the Diagnosis of Diabetes. Diabetes Care 2009;32(7):1327-1334.
27 Sacks DB, Bruns DE, Goldstein DE, Maclaren NK, McDonald JM, Parrott M. Guidelines and recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and management of diabetes mellitus. Clin Chem. Mar 2002;48(3):436-472.
28 Behan KJ, Storey NM, Lee HK. Reporting variant hemoglobins discovered during hemoglobin A1c analysis - common practices in clinical laboratories. Clin Chim Acta. Aug 2009;406(1-2):124-128.
29 Breuer J. Report on the Symposium "Drug effects in Clinical Chemistry Methods". Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:385-388.
30 Sonntag O, Scholer A. Drug interference in clinical chemistry: recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug interference studies. Ann Clin Biochem 2001;38:376-385.
31 American Diabetes Association: 1. Improving Care and Promoting Health in Populations: Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Diabetes Care. 2020;43(Suppl 1):S7-S13.
32 American Diabetes Association: 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes-2020. Diabetes Care. 2020;43(Suppl 1):S14-S31.

- 33 The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1993;329:977-986.
34 Brown A, Reynolds LR, Bruemmer D. Intensive glycemic control and cardiovascular disease: an update. Nat Rev Cardiol. Jul 2010;7(7):369-375.

Symbols / Značky / Simboli / Symboler / Symbolen / Sümبولid / Symbolit / Symboles / Symbole / Σύμβολα / Szimbólumok / Tăkn / Simboli / 記号 / Simboliai / Simboli / Symboler / Symbole / Símbolos / Simboluri / Simboli / Symboly / Símbolos / Symboler
Roche Diagnostics uses the following symbols and signs in addition to those listed in the ISO 15223-1 standard: / Společnost Roche Diagnostics používá kromě značek a znaků uvedených v normě ISO 15223-1 následující značky: / Osim simbola i znakova koji su navedeni u standardu ISO 15223-1, Roche Diagnostics primjenjuje sljedeće simbole i znakove: / Roche Diagnostics anvender nedensstående tegn og symboler ud over dem, der er angivet i ISO 15223-1 standarden: / Roche Diagnostics gebruikt de volgende symbolen en tekens naast de symbolen en tekens die vermeld staan in de norm ISO 15223-1: / Roche Diagnostics kasutab järgmisi määrke ja sümboleid lisaks loetelule ISO 15223-1 standardis: / Roche Diagnostics käyttää seuraavia symboleja ja merkkejä ISO 15223-1 -standardissa luetteltujen lisäksi: / Roche Diagnostics utilise les signes et les symboles suivants en plus de ceux de la norme ISO 15223-1 : / In Erweiterung zur ISO 15223-1 werden von Roche Diagnostics folgende Symbole und Zeichen verwendet: / H Roche Diagnostics χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα και σημεία πέραν αυτών που παρατίθενται στο πρότυπο ISO 15223-1: / Az ISO 15223-1 szabványban feltüntetettelen kívül a Roche Diagnostics az alábbi szimbólumokat és jelöléseket alkalmazza: / Roche Diagnostics notar eftirfarandi tákn og merki til viðbótar við þau sem talin eru upp í staðlinum ISO 15223-1: / Oltre a quelli indicati nello standard ISO 15223-1, Roche Diagnostics impiega i seguenti simboli: / Roche Diagnostics は、ISO 15223-1規格に記載のものに加え、以下の記号及び標識を使用します。 / Roche Diagnostics papildomai naudoja šiuos simbolius ir ženklus, be išvardytų standartė ISO 15223-1. / Papildus standartā ISO 15223-1 norādītajiem Roche Diagnostics izmanto šādus simbolus un apzīmējumus: / Roche Diagnostics bruker følgende symboler og tegn i tillegg til de som er listet opp i ISO standarden 15223-1: / Oprócz znaków zawartych w standardzie ISO 15223-1, firma Roche Diagnostics używa następujących symboli i znaków. / A Roche Diagnostics utiliza os seguintes símbolos e sinais além dos listados na norma ISO 15223-1: / Roche Diagnostics utilizează următoarele simboluri și semne, în plus față de cele enumerate în standardul ISO 15223-1: / Roche Diagnostics uporablja naslednje simbole in znake poleg tistih, navedenih v standardu ISO 15223-1: / Okrem znakov a symbolov uvedených v norme ISO 15223-1 používa Roche Diagnostics aj nasledujúce symboly a znaky. / Roche Diagnostics emplea los siguientes símbolos y signos adicionalmente a los indicados en la norma ISO 15223-1. / Roche Diagnostics använder följande symboler och tecken, utöver de som anges i ISO-standarden 15223-1:

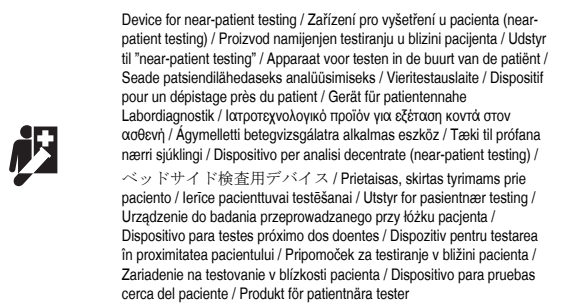


Device for near-patient testing / Zařízení pro vyšetření u pacienta (near-patient testing) / Proizvod namíjenýjen testiranju u blizini pacijenta / Udstyr til "near-patient testing" / Apparaat voor testen in de buurt van de patiënt / Seade patsiendilähedaseks analüüsimiseks / Vieritestauslate / Dispositif pour un dépistage près du patient / Gerät für patientennahe Labordiagnostik / Ιατροτεχνολογικό προϊόν για εξόραση κοντά στον ασθενή / Ágymelletti betegvizsgálótra alkalmas eszköz / Tæki til prófana nærri sjúklingi / Dispositivo per analisi decentrate (near-patient testing) / ベッドサイド検査用デバイス / Prietaisas, skirtas tyrimams prie paciento / Ierice pacientuului testăšanai / Udstyr for pasientnær testing / Urządzenie do badania przeprowadzanego przy kółku pacjenta / Dispositivo para testes próximo dos doentes / Dispozitiv pentru testarea în proximitatea pacientului / Pripomoček za testiranje v blizini pacjenta / Zariadenie na testovanie v blízkosti pacienta / Dispositivo para pruebas cerca del paciente / Produkt för patientnära tester


Contents of kit / Obsah soupravy / Sadržaj kompleta / Indhold i pakning / Inhoud van de kit / Komplekti sisu / Pakkauksen sisältö / Contenu du coffret / Inhalt der Packung / Περιεχόμενα του κιτ / A csomag tartalma / Innihald setts / Contenuto della confezione / キットの内容 / Rinkinio turinys / Iepakojuma saturs / Pakningsinnhold / Zawartość zestawu / Conteúdo do dispositivo / Conținutul titului / Vsebina kompleta / Obsah súpravy / Contenido del estuche / Innehåll i förpackning

Analyzers/Instruments on which reagents can be used / Analýzatory/přístroje, na kterých lze reagencie použít / Uredaji za analiziranje/instrumenti na kojima se reagensi mogu koristiti / Instrumenter, hvor reagenserne kan anvendes / Analyzers / instrumenten waarop reagentia kunnen worden gebruikt / Analizaatorid/aparaadid, millel saab reaktiive kasutada / Analýzaattorit/instrumentit, joissa reagensseja voidaan käyttää / Analyseurs/appareils compatibles avec les réactifs / Geräte, auf denen die Reagenzien verwendet werden können / Αναλυτές στους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αντιδραστήρια / Olyan analizátorok/készülékek, amelyeken a reagensek felhasználhatók / Greiningartæki/mælingartæki sem hægt er að nota með prófefnum / Analizzatori/trumenti su cui i reagenti possono essere usati / 試薬が使用できるアナライザー/機器 / Analizatoria/instrumentai, su kuriais gali būti naudojami reagentai / Analizatori/ekártas, kurās var izmantot reagentus / Analýzeinstrumenter hvor reagensene kan brukes / Analizatory/aparaty, w których można zastosować odczynniki / Analisadores/equipamentos em que os reagentes podem ser utilizados / Analizoare/Instrumente pe care se pot utiliza reactivi / Analizatori/instrumenti, na katerih se lahko uporabljajo reagenti / Analyzatory/Pristroje, na ktorých môžu byť reagencie použité / Analizadores/instrumentos adecuados para los reactivos / Analysinstrument på vilka reagensen kan användas

Global Trade Item Number / Globální číslo obchodní položky / Globalni broj trgovačke jedinice / Global Trade Item Number / Global Trade Item Number / Globaalne kaubaartikli number / Maailmanlaajuinen kauppatavaranumero / Code article international / Globale Artikelnummer GTIN / Διεθνής Κωδικός Μονάδας Εμπορίας / Globális Kereskedelmi Áruazonosító Szám / Alþjóðlegt vörunúmer / Global Trade Item Number / 国際標準商品識別コード / Visuotinis prekės numeris / Globālais tirdzniecības identifikācijas numurs / Artikkelnummer for global handel / Globalny handlowy numer elementu / Global Trade Item Number / Numārs Global al Articolului Comercial / Globalna trgovinska številka izdelka / Globálne identifikačné číslo obchodnej jednotky / Número mundial de artículo comercial / Globalt artikelnummer

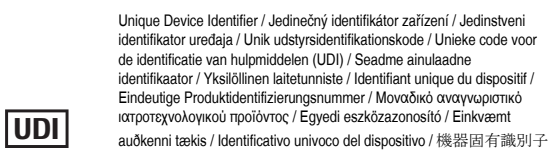

Unique Device Identifier / Jedinečný identifikátor zařízení / Jedinstveni identifikator uređaja / Unik udstyrsidentifikationskode / Unieke code voor de identificatie van hulpmiddelen (UDI) / Seadme ainulaadne identifikaator / Yksiköllinen laitetunniste / Identifiant unique du dispositif / Eindeutige Produktidentifizierungsnummer / Μοναδικό αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος / Egyedi eszközazonosító / Einkvämt aukenni tækis / Identificativo univoco del dispositivo / 機器固有識別子 / Unikalus prietaiso identifikatorius / Ierices unikālais identifikators / Entydig enhetsidentifikator / Niepowtarzalny identyfikator wyrobu / Identificação única do dispositivo / Cod unic de identificare al produsului / Edinstveni identifikator pripomočka / Jedinečný identifikátor zariadenia / Identificador único de dispositivo / Unik produktidentifering

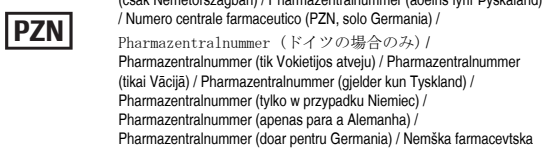

Pharmazentralnummer (for Germany only) / Pharmazentralnummer (pouze pro Německo) / Pharmazentralnummer (samo za Njemačku) / Pharmazentralnummer (kun i Tyskland) / Farmaceutisch centraal nummer (alleen voor Duitsland) / Pharmazentralnummer (ainult Saksamaal) / Pharmazentralnummer (vain Saksa) / Pharmazentralnummer (pour l'Allemagne uniquement) / Pharmazentralnummer (nur Deutschland) / Pharmazentralnummer (μόνο για τη Γερμανία) / Pharmazentralnummer (csak Németországban) / Pharmazentralnummer (adeins tyrin Pýskaland) / Numero centrale farmaceutico (PZN, solo Germania) /

ACCU-CHEK, COBAS, and NAVIFY are trademarks of Roche. INTRALIPID is a trademark of Fresenius Kabi AB.

All other product names and trademarks are the property of their respective owners.

Additions, deletions or changes are indicated by a change bar in the margin.

© 2024, Roche Diagnostics

0123

Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Strasse 116

68305 Mannheim, Germany

www.roche.com

+800 5505 6606

