


WBS KRANKENHAUSDECKE GANZKÖRPER

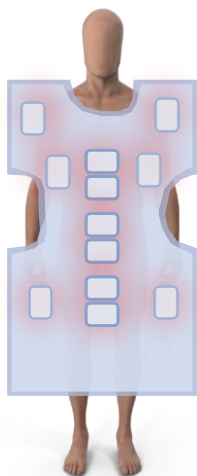

Produktbeschreibung:

Die WBS Hospital Blanket Full Body ist ein einwegs selbsterwärmendes medizinisches Gerät, das für den Einsatz im Gesundheitswesen zur Temperaturkontrolle in den vor-, intra- und postoperativen Phasen gedacht ist.

Vorgesehene Nutzung:

Das WBS Hospital Blanket Full Body hilft, Körpertemperatur bei Erwachsenen (Alter > 18 Jahre) in Krankenhäusern aufrechtzuerhalten, insbesondere in Operationsgeräten und Intensivstationen. Sie muss unter der Aufsicht eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns verwendet werden.

Behandlungsprinzip und Leistungsmerkmale:

WBS Hospital Blanket Full Body verwendet ein selbsterwärmendes System, das auf einer exothermen chemischen Reaktion zwischen den Komponenten der Heizpatches basiert.

Wenn sie der Luft ausgesetzt sind, lösen die Patches eine Reaktion zwischen dem Eisenstaub und dem atmosphärischen Sauerstoff aus, die durch das Vorhandensein von Katalysatoren erleichtert wird. Diese Reaktion erzeugt schnell und sicher Wärme und verteilt sie gleichmäßig durch die in das Deck integrierten Taschen. Das Design des SMS-Polypropylengewebes gewährleistet eine effektive Wärmedämmung, optimiert die Wärmespeicherung und bietet eine langanhaltende Wärmeversorgung über mehr als 16 Stunden.

Anleitungen zur Anwendung

Um die WBS Hospital Blanket Full Body zu verwenden, folgen Sie diesen Schritten:

- Entfernen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Vakuumpack und achten Sie darauf, die Decke nicht zu beschädigen;
- Setzen Sie die Decke der Luft aus, damit die Patches innerhalb von 15 Minuten die durchschnittliche Betriebstemperatur erreichen;
- Legen Sie die Decke auf den Patienten und achten Sie darauf, dass die angezeigte Seite ("THIS SIDE UP") in Bezug auf den Körper des Patienten nach außen zeigt;
- Es ist wichtig, das Gesicht nicht zu bedecken;
- Während der Operation stellen Sie die Decke so ein, dass sie Zugang zur Operationsstelle ermöglicht.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

Allgemeine Warnungen

Für eine sichere und effektive Anwendung der WBS Hospital Blanket Full Body befolgen Sie diese Richtlinien:

- Das Gerät ist wegwerfbar, muss nicht wiederverwendet werden und verliert nach der Nutzung seine Funktionalität. Sie muss nach der Anwendung ordnungsgemäß entsorgt werden, gemäß den Krankenhausvorschriften;
- Verwendung nur unter der Aufsicht eines qualifizierten Gesundheitsfachmanns;
- Das Gerät ist nicht steril. Ergreifen Sie Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz des sterilen Feldes;
- Es ist nicht für die pädiatrische Chirurgie vorgesehen und sollte nicht bei pädiatrischen oder gebrechlichen (älteren) Patienten eingesetzt werden;
- Bedecke niemals das Gesicht des Patienten mit der Decke;
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Haut bei offenen Läsionen, Blutergüssen, Ödemen oder Erfrierungen oder transdermale Verbände. Die erzeugte Wärme kann die Ausbreitung von Medikamenten aus transdermalen medizinischen Systemen (Pflaster) erhöhen;
- Verwenden Sie nicht in sauerstoffreichen Umgebungen, in einer hyperbaren Kammer oder in Anwesenheit von Sauerstofftherapiegeräten;
- Die Dekompression der Primärverpackung beeinflusst nicht die Leistung des Bauelements;
- Verwenden Sie es nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist.

Das Nichtbefolgen dieser Warnungen kann ernsthafte Risiken für die Gesundheit des Patienten mit sich bringen.

	Die Decke darf nicht zusammengeklappt werden.		Beobachte die Hautreaktion regelmäßig.
	Befestigungsgürtel, Klebeband, Riemen oder zusätzliche Wäsche sollten nicht auf der Decke verwendet werden.		Die beheizten Stellen sollten nach oben zeigen, wie auf dem Etikett angegeben.
	Die Decke sollte bei Patienten mit schwerer peripherer Durchblutungsstörung nicht verwendet werden.		

Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sind unerlässlich, um eine sichere Anwendung der WBS Hospital Blanket Full Body zu gewährleisten und mögliche Thermalschäden zu vermeiden:

- Die korrekte Seite der Decke ist mit den Worten "THIS SIDE UP" markiert und muss immer korrekt positioniert werden;
- Falten Sie die Decke nicht wieder auf sich selbst;
- Üben Sie keinen Druck aus und fügen Sie keine Gewichte auf die Decke hinzu, einschließlich medizinischer Instrumente oder anderer schwerer Gegenstände;
- Überwachen Sie ständig die Hautreaktion des Patienten, insbesondere bei längerer Nutzung;
- Nicht bei Patienten mit schweren peripheren Durchblutungsstörungen verwenden, darunter:
 - Schwere Hypotonie oder vorhersehbare anhaltende Hypotonie;
 - Schwere periphere Gefäßerkrankungen;
 - Aortenchirurgie oder distale Aortenklammern;
 - Schwere Herzinsuffizienz oder kardiogener Schock.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Schwangeren oder ohne vorherige ärztliche Konsultation zu stillen.

Kontraindikationen und Nebenwirkungen

Im Falle von Übersensibilisierung, Hautreizungen oder Allergien wird empfohlen, sofort abzusetzen und die Nutzung des Geräts und konsultieren Sie einen Arzt oder Apotheker.


Der Nutzer muss alle Kontraindikationen, Nebenwirkungen oder schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit der Nutzung des Geräts sowohl dem Hersteller

certificazioni@biozetatec.com als auch der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates melden, um zur Verbesserung der Produktsicherheit beizutragen.

Lagerung und Stabilität

Das WBS Hospital Blanket Ganzkörpergerät ist einzeln vakuumverpackt in Polyamid- und Polyethylensäcken, die darauf ausgelegt sind, die Integrität des Produkts zu gewährleisten und es bis zur Nutzung vor Verunreinigungen zu schützen.

Das Gerät sollte an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden, fern von Wärmequellen, die die Integrität des Produkts beeinträchtigen könnten. Es ist unerlässlich, sicherzustellen, dass die Verpackung bis zur Einsatzbereitschaft fest geschlossen bleibt, um das Gerät vor Verunreinigungen und externen Einflüssen wie Feuchtigkeit und Staub zu schützen. Richtige Lagerung hilft, um die Wirksamkeit und Sicherheit des Geräts während der gesamten angegebenen Dauer aufrechtzuerhalten. Das Gerät behält seine Eigenschaften 48 Monate ab dem Herstellungsdatum, wenn es ungeöffnet aufbewahrt wird. Sobald sie geöffnet ist, sollte die Decke sofort verwendet werden und kann nicht länger gelagert werden.

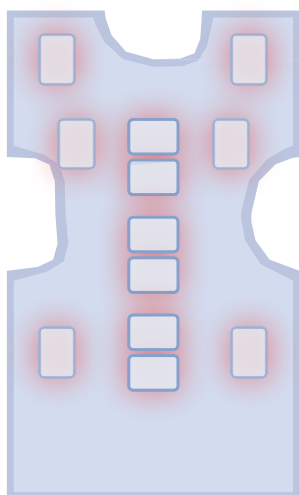

WBS KRANKENHAUSDEC KE GANZKÖRPER

Krankenhaus-Selbstheizdecke

VERWENDEN SIE NICHT, WENN DAS PAKET BESCHÄDIGT IST



Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften und in Absprache mit den Vorschriften Ihrer Gemeinde erfolgen. Die daneben stehende Tabelle zeigt die Recycling:

IFU UND SCHACHTELN	PAPIER		ABDECKUNG	UNSORTIERTER ABFALL	
VAKUUMBEUTEL	PLASTIK		PATCH	UNSORTIERTER ABFALL	

Symbollegende

SÍMBOLO	BEDEUTUNG	SÍMBOLO	BEDEUTUNG
	HERSTELLER VON MEDIZINPRODUKTEN		KENNZEICHNUNG MEDIZINPRODUKT
	CE-KENNZEICHNUNG		NICHT VERWENDEN, WENN DIE VERPACKUNG BESCHÄDIGT IST
	EINWEGGERÄT, NICHT WIEDERVERWENDEN		ERFORDERLICH FÜR DIE MARKTÜBERWACHUNG
	CHARGENNUMMER		VERFALLSDATUM
	UDI CODE		REF-NUMMER
	NICHT STERIL		WARNUNGEN
	ENTHÄLT KEINE PHTHALATE		ENTHÄLT KEINEN LATEX
	ACHTUNG: GEBRAUCHSANWEISUNGLESEN		TROCKEN HALTEN UND VOR FEUCHTIGKEIT UND DIREKTEM SONNENLICHT GESCHÜTZT



Weitere Informationen
finden Sie unter
www.wbs.care



Referenz: [WBS0001](#)